

**RUSCH**



**CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA RUSCH®  
CRYSTALCLEAR™ PLUS**

Mais conforto e segurança para o paciente e o provedor de saúde.

**Teleflex**

# CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA STANDARD


Mais conforto e segurança para o paciente e o provedor de saúde.

## CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA CRYSTALCLEAR™ PLUS: AVANÇADO SISTEMA DE TUBOS DE PVC TERMOSENSÍVEL COM CÂNULA INTERNA FLEXÍVEL

O material plástico termosensível macio se adapta à anatomia do paciente. As secreções são removidas de forma simples e eficiente em um estágio inicial de acumulação pelas mudanças frequentes da cânula interna, protegendo o lúmen do tubo interno contra contaminação. Incluindo um flange de fixação aberto e transparente e um conector giratório integrado, este sistema foi desenvolvido para fornecer mais conforto e aumentar a segurança durante o uso. Os tubos apresentam balão de baixa pressão e estão disponíveis em tamanhos intermediários.


### O TUBO: APRESENTA BALÃO DE BAIXA PRESSÃO

- Material termosensível do tubo para aumentar a flexibilidade
- Marcador contínuo de raio X ao longo do eixo do tubo
- Conector giratório integrado de 15 mm
- Conector macio. Flange de fixação aberto e transparente para proporcionar um encaixe confortável.
- Estéril
- O produto não contém borracha natural
- Sistema descartável para reduzir o risco de contaminação cruzada

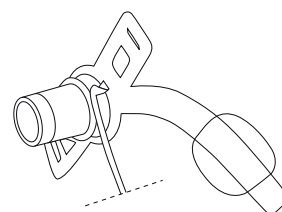


### CÂNULA INTERNA FLEXÍVEL: INTERRUPTOR COLORIDO


- Sistema de cânula interna flexível para facilitar o manuseio
- Interruptores codificados por cores para agilizar a identificação segura dos tamanhos
- É possível coletar o muco e a secreção dentro da cânula interna, protegendo o lúmen do tubo interno contra a contaminação
- Suporta medidas de prevenção de infecção ao evitar que germes cresçam dentro do tubo de traqueostomia ao manter o tubo interno sem secreções

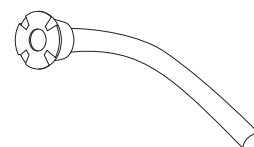

### OBTURADOR

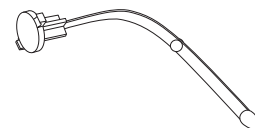

### FITA DE FIXAÇÃO MACIO PARA O TUBO DE TRAQUEOSTOMIA

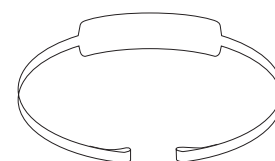

## CONJUNTO DE TRAQUEOSTOMIA RUSCH® CRYSTALCLEAR™ PLUS

Melhora a segurança e proporciona suporte à prevenção de infecções





#### **SEGURANÇA E FACILIDADE DE MANUSEIO**

Nosso conjunto de tubo de traqueostomia CrystalClear Plus é um sistema descartável que ajuda a reduzir o risco de infecções, já que seu sistema de cânula interna especialmente desenvolvido protege o lúmen do tubo interno contra a secreção. A remoção de secreções é simples e eficiente em um estágio inicial do acúmulo através de frequentes trocas da cânula interna. Acessórios ajudam o paciente a limpar o muco.

#### **CONFORTO E EFICIÊNCIA**

Nosso conjunto de tubos de traqueostomia CrystalClear Plus é um avançado sistema de tubos com um sistema de cânulas internas flexíveis. Distingue-se devido à sua grande qualidade, a relação de custo/benefício e o grande conforto na utilização. Simples e seguro de usar, proporciona conforto e eficiência no tratamento de pacientes de traqueostomia.

#### **AMPLA VARIEDADE DE TAMANHOS**

O CrystalClear Plus está disponível nos tamanhos de D.I de 6,0 a 10,0 mm em incrementos de 0,5 mm.



Para obter mais informações, visite  
[www.TELEFLEX.com](http://www.TELEFLEX.com)



### CONJUNTO HOSPITALAR CRYSTALCLEAR PLUS com balão



#### COMPONENTES DO CONJUNTO

- 1 tubo de traqueostomia
- 1 cânula interna flexível com interruptor codificado por cor
- Fita de fixação macio
- Obturador

CONJUNTO HOSPITALAR	ref.	Tamanho de pedido/D.I.	Qty
	121611	6,0a 10,0	5

CÂNULA INTERNA DO CONJUNTO HOSPITALAR	ref.	Tamanho de pedido/D.I.	Qty
	121310	6,0a 10,0	10

### CONJUNTO PARA HOMECARE CRYSTALCLEAR PLUS com balão



#### COMPONENTES DO CONJUNTO

- 1 tubo de traqueostomia
- 3 cânulas internas flexíveis com interruptor codificado por cor e fita de fixação macio
- Obturador

CONJUNTO PARA USO HOMECARE	ref.	Tamanho de pedido/D.I.	Qty
	851611	6,0a 10,0	1

CÂNULA INTERNA DO CONJUNTO PARA USO HOMECARE	ref.	Tamanho de pedido/D.I.	Qty
	858610	6,0a 10,0	2

## INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

### TUBO DE TRAQUEOSTOMIA CRYSTALCLEAR PLUS

RUSCH

	Tamanho de pedido/D.I.	D.E.	Comprimento total (CLL A+B+C)	DIM. A	DIM. B	DIM. C	Ângulo θ (aprox.)	Balão ø*	Cânula interna
Adulto	6,0	8,7 mm	64 mm	25,5 mm	0	38,5 mm	95°	19 mm	6,0
	6,5	8,7 mm	64 mm	25,5 mm	0	38,5 mm	95°	19 mm	6,5
	7,0	10,0 mm	70 mm	29,2 mm	0	40,8 mm	95°	21 mm	7,0
	7,5	10,7 mm	75,5 mm	30 mm	0	45,5 mm	95°	25 mm	7,5
	8,0	11,3 mm	81 mm	35,5 mm	0	45,5 mm	95°	28 mm	8,0
	8,5	11,3 mm	81 mm	35,5 mm	0	45,5 mm	95°	28 mm	8,5
	9,0	12,7 mm	87 mm	39,9 mm	0	47,1 mm	95°	28 mm	9,0
	9,5	12,7 mm	87 mm	39,9 mm	0	47,1 mm	95°	28 mm	9,5
	10,0	14,0 mm	95,5 mm	48,4 mm	0	47,1 mm	95°	30 mm	10,0

Teleflex, CrystalClear e Rusch são marcas comerciais da Teleflex Incorporated ou de suas afiliadas registradas nos EUA e/ou em outros países.

A Teleflex é uma fornecedora global de produtos médicos projetados para permitir que os profissionais da saúde protejam contra infecções e aumentem a segurança do paciente e do profissional. A empresa é especializada em produtos e serviços para acesso vascular, anestesia respiratória, geral e regional, procedimentos cardíacos, urologia e cirurgia. A Teleflex também fornece produtos especializados para fabricantes de dispositivos.

© 2015 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados. LA-MC-000595 PT



TELEFLEX LATIN AMERICA 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560 USA  
For product information please contact [la.cs@teleflex.com](mailto:la.cs@teleflex.com) or +1.919.433.4999  
TELEFLEX.COM