



Rüsch®  
**CrystalClear® Plus**  
 Tubo de Traqueostomía

**Respalda el Cuidado Efectivo de la Traqueostomía**

La serie de Tubos de Traqueostomía desechables Rüsch® CrystalClear® Plus de Teleflex® está compuesta por tubos de traqueostomía con balón, sin balón o fenestrados (con balón y sin balón), que vienen con dos cánulas internas flexibles desechables. Esta gama es particularmente adecuada para un estoma de traqueostomía nuevo, en situaciones de primera intubación. Fabricados a partir de tubos de PVC termosensible, y con una pestaña de PVC fina y flexible, los Tubos de Traqueostomía Rüsch® CrystalClear® Plus se han diseñado para la comodidad del paciente y el cuidado efectivo del estoma<sup>1</sup>. La flexibilidad de su pestaña le permite ajustarse a la anatomía del paciente con un contacto mínimo con la piel, cuando no se requiere un apósito de estoma; también ayuda a minimizar el movimiento del tubo durante el cuidado, y facilita el acceso al sitio del estoma para limpiar, a fin de reducir el riesgo de infección<sup>2</sup>.

**Diseñados para la Seguridad del Paciente**

Los Tubos de Traqueostomía Rüsch® CrystalClear® Plus tienen cánulas internas flexibles codificadas por colores específicos para cada tamaño que se corresponden con la escritura de color en la inscripción de la pestaña. Esto ayuda a evitar el uso accidental de una cánula interna del tamaño incorrecto, lo cual podría aumentar el “esfuerzo respiratorio” y, potencialmente, comprometer la salud del paciente. Asimismo, la cánula interna flexible puede extraerse y reemplazarse, lo que ayuda a prevenir la acumulación de biopelícula y secreciones que podrían ocluir la cánula externa y restringir la ventilación. Entre las características de seguridad adicionales se incluyen la capacidad de girar el conector de 15 mm para reducir la torsión en el circuito de ventilación, y la curvatura de 95° del tubo, lo que facilita un ajuste seguro en los estomas nuevos para reducir el riesgo de que las cánulas se salgan de forma accidental.

**Beneficios**



**Clínicos**

Las cánulas internas codificadas por colores ayudan a identificar el tamaño para una mayor tranquilidad



**Su Institución**

Diseñado para reducir el riesgo de un desplazamiento accidental del tubo en la unidad de cuidados intensivos



**El Paciente**

Las características de diseño ayudan a mantener las vías aéreas permeables

# Rüsch® CrystalClear® Plus


## Tubo de Traqueostomía

### 15 mm Conector Giratorio

Diseñado para reducir la torsión con circuitos de ventilación.

### Balón

Los tubos están disponibles con o sin balón

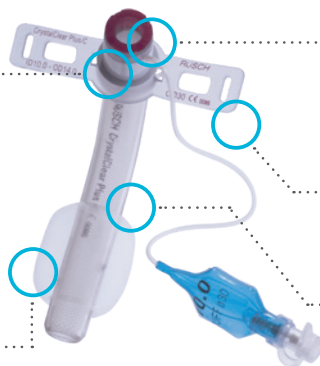

### Cánula Interna

Codificación por colores específica para cada tamaño para facilitar la identificación de tamaños

### Pestaña Fina y Flexible

Facilita el cuidado efectivo del estoma

### Cuerpo de 95°

Promueve un ajuste seguro para ayudar a prevenir que las cánulas se salgan de forma accidental

## Datos Principales sobre el Tubo de Traqueostomía Rüsch® CrystalClear® Plus:

La cartera desechable ayuda a reducir el riesgo de infección asociado con los tubos de traqueostomía reutilizables.

Se vende con dos cánulas internas flexibles codificadas por colores.

Pestaña Flexible para permitir un buen acceso al estoma.

Compatible con el Dilatador para Traqueostomía Percutánea Rüsch® PercuTwist®.

## Tubo de Traqueostomía Rüsch® CrystalClear® Plus

CÓDIGO DE PRODUCTO*	CÓDIGO DE PRODUCTO**	TAMAÑO/ D. I. (MM)	D. E. (MM)	LONGITUD (MM)	ÁNGULO Ø APROX.	BALÓN Ø (MM)	CÁNULA INTERNA	CÓDIGO DE COLOR	CANT.
NO FENESTRADO									
121300-000035	121303-000035	3.5	5.3	47.0	95°	11.0	-	-	5
121300-000040	121303-000040	4.0	5.9	54.0	95°	12.0	-	-	5
121300-000045	121303-000045	4.5	6.5	54.0	95°	14.0	-	-	5
121300-000050	121303-000050	5.0	7.0	57.0	95°	14.0	-	-	5
121300-000055	121303-000055	5.5	7.5	58.0	95°	15.0	-	-	5
121300-000060	121303-000060	6.0	8.7	64.0	95°	19.0	6.0	Naranja	5
121300-000065	121303-000065	6.5	8.7	64.0	95°	19.0	6.5	Granate	5
121300-000070	121303-000070	7.0	10.0	70.0	95°	21.0	7.0	Azul	5
121300-000075	121303-000075	7.5	10.7	75.5	95°	25.0	7.5	Amarillo	5
121300-000080	121303-000080	8.0	11.3	81.0	95°	28.0	8.0	Lila	5
121300-000085	121303-000085	8.5	11.3	81.0	95°	28.0	8.5	Verde	5
121300-000090	121303-000090	9.0	12.7	87.0	95°	28.0	9.0	Cafe	5
121300-000095	121303-000095	9.5	12.7	87.0	95°	28.0	9.0	Azul marino	5
121300-000100	121303-000100	10.0	14.0	95.5	95°	30.0	10.0	Rojo	5

\* Sin Balón. \*\* Con Balón. \*\*\* Disponible a partir de diciembre de 2018

## Equipo para PDT Rüsch® CrystalClear®

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO/ D. I. (MM)	D. E. (MM)	LONGITUD (MM)	ÁNGULO Ø APROX.	BALÓN Ø (MM)	CÓDIGO DE COLOR	CANT.
NO FENESTRADO CON BALÓN							
121304-000070	7.0	10.0	70.0	95°	21.0	Azul	1
121304-000080	8.0	11.3	81.0	95°	28.0	Lila	1
121304-000090	9.0	12.7	87.0	95°	28.0	Cafe	1

## Accesorios Rüsch® CrystalClear®

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.
121311	Tapón para la ducha para Rüsch® CrystalClear® Plus	4
121312	Tapón para la tos para Rüsch® CrystalClear® Plus	4
121313	Tapón de sellado para Rüsch® CrystalClear® Plus	4

## Cánula Interna Rüsch® CrystalClear®

CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO	D. I. (MM)	D. E. (MM)	CÓDIGO DE COLOR	CANT.
121310-000060	6.0	5.0	5.7	Naranja	10
121310-000065	6.5	5.0	5.7	Granate	10
121310-000070	7.0	6.0	6.7	Azul	10
121310-000075	7.5	6.5	7.3	Amarillo	10
121310-000080	8.0	7.0	7.7	Lila	10
121310-000085	8.5	7.0	7.7	Verde	10
121310-000090	9.0	8.0	8.7	Café	10
121310-000095	9.5	8.0	8.7	Azul marino	10
121310-000010	10.0	8.8	9.7	Rojo	10

### Referencias:

- Wilkinson KA, Martin IC, Freeth H, Kelly K, Mason M. *NCEPOD: On the right Trach?* 2014. Disponible en: <http://bit.ly/ontherighttrach>. Se accedió el martes, 22 de agosto de 2017.
- Mallett J, Albarán JW, Richardson A, eds. *Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies*. Oxford, R. U.: Wiley Blackwell; 2013.

El contenido del paquete sin abrir y sin daños está limpio, listo para usar y es de un solo uso. Consulte en el folleto interno las advertencias, indicaciones, contraindicaciones, precauciones e instrucciones de uso.

Teleflex, el logotipo de Teleflex, CrystalClear, PercuTwist y Rüsch son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Teleflex Incorporated o sus afiliadas en los EE. UU. o en otros países. La información incluida en este material no sustituye las instrucciones de uso del producto. No todos los productos están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local. Revisado: 05/2018 © 2018 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. MC-004463 LA ES